


Hudstans Steril

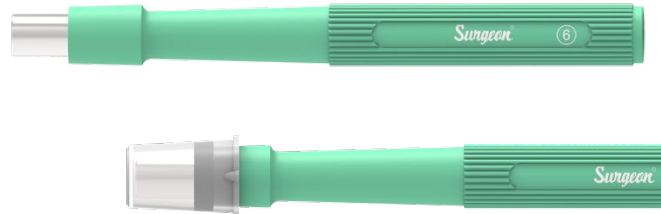

Ingående delar/material	Material	Färg
Handtag:	ABS/HIPS	Olika kulörer beroende på stl
Kyrett:	Rostfritt stål	Metall/Silver
Kyrettskydd:	LLDPE	Transparent
Förpackningar	Material	Avfallshantering*
Innerförpackning IFP	medicinsk papper/laminat	plast/papper
Avdelningsförpackning AFP	kartong	papper/kartong/brännbart
Transportförpackning TFP	korrugerad kartong	kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Stl mm	Färg	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
03517	2	Benvit	1	10	800	TFP
03519	3	Grå	1	10	800	TFP
03521	4	Ljusblå	1	10	800	TFP
03523	5	Rosa	1	10	800	TFP
03524	6	Ljusgrön	1	10	800	TFP
03526	8	Lila	1	10	800	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Används för att ta biopsier i diagnostiskt syfte. Hudstansarna är märkta med storlek och färgmarkering.

Bruksanvisning






Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna blisterförpackningen (bibeåll sterilitet).
2. Ta ut hudstansen.
3. Utför procedur för biopsi.
4. Kassera hudstansen enligt lokala anvisningar.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Medicinteknisk produkt
	CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745 klass IIa
	Produkt steriliserad genom strålning.
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2021

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt


Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt




och ansluten till



 **Manufacturer:**
Razormed Inc.
B3 Infocity, Sector 33-34
Gurgaon 122001, Haryana
India (IN)
www.razormed.com

 **Importer:**
AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

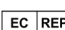 **EC-REP:**
Advena Ltd.
Tower Business Centre
2nd Flr. Tower Street
Swatar, BKR 4013 Malta